

1 リブレView医療従事者アカウント登録

- 1 <https://www.LibreView.com>へアクセスし(または「LibreView」で検索)、「新規登録」より、「医療従事者アカウント」として登録します。



- 2 居住国で「日本」を選択し、「利用規約」、「個人情報ポリシー」を確認・承認のうえ、必要な項目を入力します。

※医療機関情報は正確に入力ください。患者さんがデータ連携をする際に表示されます(後で編集可能です)。

- 3 入力後、登録したメールアドレスに本人確認のメールが配信されます。メールを開封し、「メール確認」をクリックします。

※受信ボックスにメールが見つからない場合、「迷惑フォルダ」に振り分けられていないか確認ください。



- 4 再度、入力画面に戻り、右下の「次へ」をクリックし、登録を完了させます。

② 新規医療プラクティスの作成

患者さんや他の医療スタッフとのデータ共有のためには
「医療プラクティス」の作成が必要です。

- 1 画面右上の
「メニュー」アイコン  を選択します。



- 2 「新規医療プラクティスの作成」
を選択します。



- 3 必要項目を全て入力し、
右下の「作成」を選択します。

※医療施設情報は正確に入力ください。患者さんがデータ連携をする際に表示されます(後で編集可能です)。

※「医療プラクティスID」は、患者さんがデータ連携する際に入力します。入力しやすい形式としつつ、他の施設と混同されないようご注意ください。
※医療プラクティスIDは、後でも変更可能ですので、初回はデフォルト設定のままでも結構です。

※住所の入力が海外仕様となっております。

③ デバイスドライバーのインストール

測定器よりデータをアップロードするためには、使用するPCへのリブレView デバイスドライバーのインストールが必要です。

- 1 画面左上の「測定器のアップロード」アイコンを選択します。



- 2 アップロードページより「リブレView デバイスドライバーのダウンロード」リンクをクリックします。




- 3 ご使用のパソコンのOS (Windows、またはMac) に応じて選択し、ドライバーをダウンロード後、ファイルを開き実行します。



- 4 インストール実施にあたり、PCの管理者権限での「ユーザー名」「パスワード」が必要です。入力後は「はい」を選択し、案内に従いインストールを完了させてください。

※管理者権限が分からない場合、施設のシステム担当者、または担当部門にお問い合わせください。

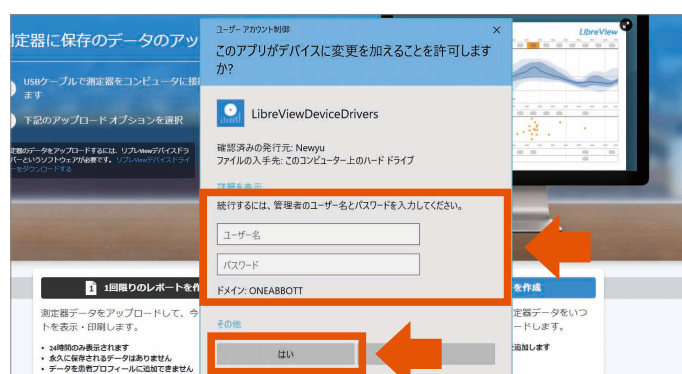

Option ケアチームの作成、メンバーの追加

他の医療従事者を医療プラクティスのケアチームに招待することで、患者さんのデータを共有することが可能となります。

- 1 画面右上の「メニュー」アイコン  をクリックし、「私の医療プラクティス」より作成した医療プラクティスを選択します。



- 2 左側のメニューより「ケアチーム」を選択。画面上の「医療従事者をケアチームに招待する」をクリックします。



- 3 追加したい医療従事者の「氏名」「メールアドレス」を入力し、右下の「保存」をクリックし招待メールを送付します。

※管理者権限を付与できるか選択できます。管理者は、メンバーの招待や権限の付与等の管理が可能です。



- 4 受信メールより「招待を承諾」を選択し、画面案内に従い新規登録（既に登録済みであればログイン）実施します。

※招待したメンバーの登録・承認状況、ログイン状況は、ケアチーム画面から確認可能です。

